

Pioneer

快適コミュニケーション空間



イヤートナー



PHA-B51

PHA-C11

イヤートナー仕様	PHA-B51		PHA-C11	
一般名称	耳かけ型補聴器		耳あな型補聴器	
医療機器分類	管理医療機器		管理医療機器	
販売名	イヤートナー		耳あな型補聴器 PHA-C11	
認証番号	226AABZX00020000		225AABZX00019000	
90 dB 最大出力音圧レベル	1 600 Hz	98 dB±5 dB SPL	1 600 Hz	103 dB±5 dB SPL
	ピーク	115 dB SPL 以下	ピーク	109 dB SPL 以下
最大音響利得(入力音圧 50 dB SPL)	1 600 Hz	23 dB±5 dB	1 600 Hz	23 dB±5 dB
	ピーク	41 dB±5 dB	ピーク	25 dB±5 dB
電池の電流	1.6 mA 以下		1.2 mA 以下	
電池の種類	空気電池 PR48/13 1.4 V		空気電池 PR41/312 1.4 V	
電池の寿命(連続使用時間)	約180時間		約165時間	
適応範囲	軽度～中等度		軽度	
質量	4.4 g(電池・サウンドチューブ・イヤートップ含まず)		1.05 g(電池・イヤートップ含まず)	

装着者の聞こえの状態によっては、補聴器の効果が異なる場合があります。本データはJIS C 5512:2000の密閉形疑似耳により測定してあります。電池寿命は使用状況によって異なります。

⚠️ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「添付文書、取扱説明書および保証書付説明書」をお読みください。

●次の場合、補聴器を使用しないでください。①耳を治療中の場合。②耳の中に痛みがある場合。③先天的または外傷による明らかな耳の変形がある場合。④過去90日以内に耳漏を生じた経験がある場合。⑤過去90日以内に急激または急速な難聴の進行を生じた経験のある場合。⑥急性または慢性的めまいがある場合。⑦耳垢または異物の集積が明らかな場合。⑧就寝時。

お客様サポート

<http://pioneer.jp/support/>

カタログや取扱説明書のダウンロード、よくあるお問い合わせなどの商品サポート情報のホームページです。カタログの送付申し込みもこちらから行えます。

商品に関するお問い合わせおよびカタログのご請求は下記のカスタマーサポートセンターへお電話でどうぞ(全国共通 ☎)

カスタマーサポートセンター ●お問い合わせおよびカタログのご請求窓口
☎0120-959-875 (☎)044-577-7658

(ご注意)市外局番[0120]で始まるフリーコールはPHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話などではご利用できません。また[一般電話]は、携帯電話、PHS、IP電話などからのご利用が可能です。通話料金がかります。予めご了承ください。

●営業時間/月曜～金曜9:30～12:00、13:00～18:00(土曜・日曜・祝日・弊社休業日除く) *詳しくは製品同封の「サポートシート」をご参照ください。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店へ、もし、販売店でお取り扱いにならない場合は、弊社のカスタマーサポートセンターへおたずねください。●このカタログに掲載の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。●写真の製品の色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。●ハガキによるカタログの請求は希望商品名をご記入の上、〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号 パイオニアカスタマーサポートセンターへ、●ホームページにてカタログ請求もっております。

本カタログに記載の商品の価格には、配送費・据付費・使用後の商品引きとり代金などは含まれておりません。

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1-1
©PIONEER CORPORATION 2014

この印刷物には環境に配慮した植林木の用紙および植物性大豆油インキを使用しています。

このカタログの記載内容は2014年6月現在のものです。
ZZT101

会話がふえると笑顔がひろがる。

パイオニアがデジタル補聴器「イヤーパートナー」に込めた想い。

それは、聞こえに悩むあなたのおきパートナーとして大切な家族や友人との会話をサポートすること。

年を重ねても、アクティブに、楽しく、趣味や生活を謳歌したい。

オーディオメーカーだからこそ実現したよりよい聞こえで、快適なコミュニケーションをお届けします。

こんな方におすすめです

- 家族に、テレビの音が大きいと言われる。
- 会話中の聞き間違いや二度聞きが多い。
- 病院の待合室で名前を呼ばれても気が付かない。
- 「日比谷」と「渋谷」、など聞き間違えることがある。

「イヤーパートナー」は、左右どちらでもお使いいただけます。
よりよい聞こえのために、両耳装用をおすすめします。

難聴の種類について

軽度 対象機種 PHA-C11 PHA-B51

二度聞きしたり、聞き間違えることがある。

中等度 対象機種 PHA-B51

大きめの声でなければ聞き取れない。

高度

耳元での大声でなければ聞き取れない。

重度

日常の音声ほとんど聞こえない。



軽度～中等度難聴者用

会話に、テレビ鑑賞に、お出かけに。
シーンに合わせた聞こえ方で、日常をもっと楽しく。

軽度から中等度難聴者に対応した耳かけ型補聴器「PHA-B51」。
聞きたい声に集中できる「スピーチフォーカス機能」や、
「会話」「テレビ鑑賞」「お出かけ」のシーンに最適化した聞こえ方を選択できる
機能を搭載。日常生活をもっと謳歌する楽しさをお届けします。



耳かけ型補聴器

PHA-B51

希望小売価格 75,000円(非課税)

JANコード:4988028263644

医療機器認証番号:226AABZX00020000

■付属品

- ①イヤークリップ3種
(M・L)×1 (フリー)×2
- ②サウンドチューブ3種
(S・M・L)×左右
- ③お試し電池
- ④掃除ブラシ
- ⑤携帯ケース



▶ 聞きたい音に集中できる。

- 聞きたい声をより聞き取りやすく。
「スピーチフォーカス機能※」

2個のマイクで後方にある雑音を抑制し、騒々しい環境でも会話に集中しやすくします。

※会話モードに搭載しています。



前方と後方の音を聞きわたる2種類のマイクを搭載

前後2つのマイクで集音

後方の雑音を抑制※して前方の話し手にフォーカス

※すべての雑音を抑制することはできません。

- 聞こえ方を3つのモードで切替可能

会話モード


ご家族やお友達と会話する時などに、聞き取りやすくします。

テレビモード

テレビを見る時に、音声を聞き取りやすくします。

お出かけモード

お散歩の時など、屋外で気になる雑音を抑えます。

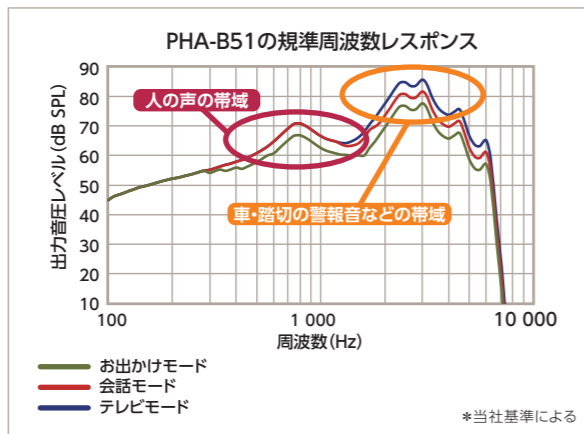

※当社基準による

- ワンタッチで簡単なモード切替※

ボタンを押すだけで、3つのモードを切り替えることができます。



※電源を入れたときには「会話モード」になります。


▶ デジタルで、聞こえがよりクリア。

- アナログ方式では難しいハウリング（ピーピー音）の抑制をデジタル方式で処理する「ハウリング抑制機能」を搭載

- 雑音抑制機能を搭載

▶ 耳穴の形やお好みに合わせて、使いやすい。

- 様々な形の耳穴にフィットしやすい
フリーサイズの巻き込み形状イヤーチップ

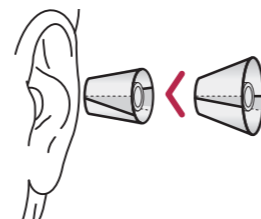

耳穴に合わせて変形します。



フリーサイズの他にLサイズとMサイズが付属します。

▶ 汗や湿気に強い。

- 精密機器専用の撥水コーティングを表面だけではなく内部部品まで採用

*防水ではありません。
*本製品を水やほかの液体に浸すことは、故障の原因となりますので、絶対に避けてください。



- 様々な形の耳穴にフィットしやすい
フリーサイズの巻き込み形状イヤーチップ

- 耳の大きさ（サイズ）に合わせて選べる3種類の
スリムなサウンドチューブ




- 目立たずスタイリッシュな
マットブラックカラー採用
- 連続約180時間使用可能※
※電池寿命は使用状況によって異なります。
- 電池が少なくなったら
サウンドでお知らせ
- ギフトにも嬉しい、
おしゃれなパッケージ



▶ 日常会話が、もっと安心、もっと快適。

軽度難聴者に対応した耳あな型補聴器「PHA-C11」。
聞きたい会話は逃さず、不要な生活雑音は控え目に、
車や踏切など外出時の安全に必要な音にも配慮。
快適な聞こえとともに、日常生活の安心をサポートします。

● 人の声や車・踏切の警報音などを中心に音を増幅

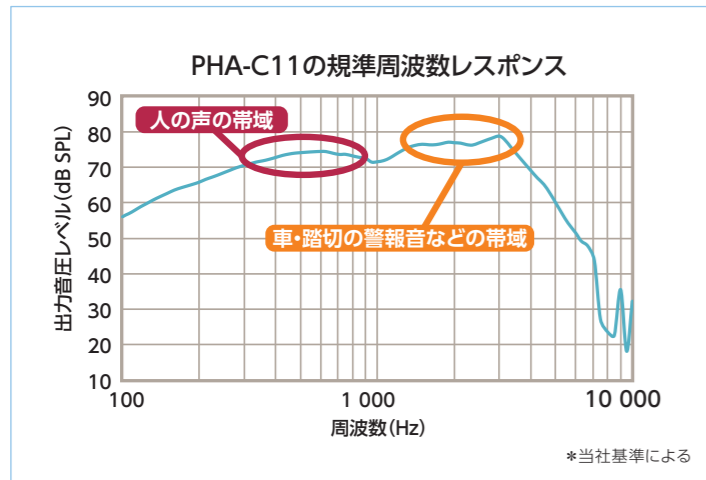

▶ はじめての方にも、使いやすい。

● 様々な形の耳穴にフィットしやすい フリーサイズの巻き込み形状イヤーチップ



● プッシュボタンでカンタン! 4段階の音量選択が可能



音量が最小になってから次にボタンを押した時は、
最大に戻ります。

▶ デジタルで、聞こえがよりクリア。

● アナログ方式では難しいハウリング(ピーピー音)の抑制 をデジタル方式で処理する「ハウリング抑制機能」を搭載

▶ 使って、安心。

● 目立たない肌色・小型タイプ、左右兼用

● 耳あかのつまりを防ぐ 「耳あかガード」付き

● 耳から本体を取り出しやすい テグス(つまみ)付き

● 連続約165時間使用可能※

※電池寿命は使用状況によって異なります。

● 電池が少なくなったらピピッとお知らせ

● ギフトにも嬉しい、おしゃれなパッケージ



装着イメージ



パッケージ



耳あな型補聴器

PHA-C11

希望小売価格 34,800円(非課税)

JANコード:4988028211171

医療機器認証番号:225AABZX00019000

■ 付属品

- 1 イヤーチップ3種 (S・M・フリー)
- 2 お試し電池
- 3 掃除ブラシ
- 4 耳あかガード
- 5 携帯ケース

